

# INSPIRATION


Kundenmagazin theramed ag



DIALYSE

## NIPRO ELISIO™ HX – NEUARTIGER SHARP-CUT-OFF-HD-DIALYSATOR DER NÄCHSTEN GENERATION

Dialysepatienten haben verschiedene Begleiterkrankungen und unterschiedliche medizinische Bedürfnisse. Im Zentrum steht die Entzündung und Sarkopenie. Dank der ständigen Fortschritte in der Dialysetechnik kann heute ein breiteres Spektrum an urämischen Toxinen bei Patienten entfernt werden. High Volume HDF hat sich in mehreren Ländern zum Goldstandard entwickelt, da die Überlebensraten höher sind.

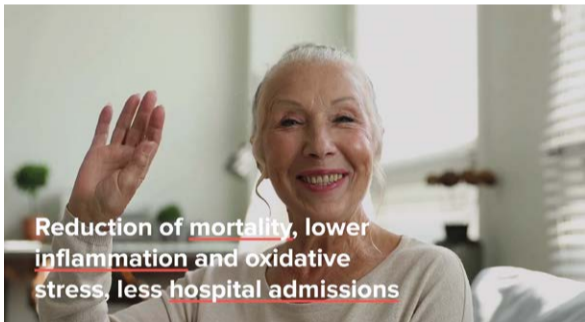

Einige Patienten kommen jedoch nicht für die HDF-Behandlung in Frage. Die Gründe dafür:


- Ungeeigneter Gefässzugang
- Es können keine effizienten konvektiven Volumina erreicht werden
- Gerinnungsprobleme
- Hohe Hämatokritwerte



Für diese Patienten sollte der am besten geeignete Dialysator einen minimalen Albuminverlust aufweisen und gleichzeitig eine hohe Clearance urämischer Toxine gewährleisten.

### Optimale Entfernung von mittelmolekularen urämischen Toxinen durch Elisio HX

Der neuartige Super-High-Flux-Sharp-Cut-Off-Dialysator Elisio HX von Nipro mit einer Kombination aus grösseren Poren und spezifischer Geometrie wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an mittelmolekularen urämischen Toxinen zu entfernen. Diese könnten schwerwiegende klinische Auswirkungen auf die Patienten haben.

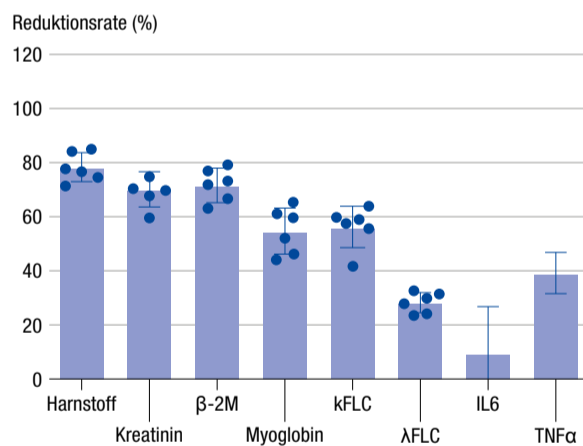

Lesen Sie den kompletten Artikel auf unserer Website.

> <https://www.theramed.ch/news/dialyse.html>

## VERSORGUNGSSICHERHEIT

Die anhaltenden Herausforderungen der globalen Lieferketten und der Logistik erschweren es, die **Versorgungssicherheit** zu gewährleisten. Hersteller von Medizinprodukten sind darüber hinaus gefordert, die **neue EU-Verordnung** zu Medizinprodukten (MDR) umzusetzen. Nicht alle heute verwendeten Produkte werden nach der neuen Norm zertifiziert werden können. Auch bei weitergeführten Artikeln könnte es zu einer verspäteten Rezertifizierung kommen. Ausländische Hersteller müssen dieses Jahr zudem für den Schweizer Markt einen **Schweizer Bevollmächtigten** (CH REP) einsetzen – und zwar zeitlich abgestuft nach Risikoklasse. Einige Hersteller empfinden diesen Aufwand als zu gross. Deshalb stellen sie den Vertrieb in die Schweiz ein.

Bei all diesen Unsicherheiten ist es gut zu wissen, dass Theramed für Sie als Schweizer Kunden ein **eigenes Lager** führt. Dessen Reichweite erlaubt es, Störungen in der Lieferkette zu überbrücken oder aber genügend Vorlaufzeit für alternative Lösungen zu schaffen. Wir stehen in regem Austausch mit unseren **Vertragslieferanten**. Zeichnen sich Verzögerungen ab, erhöhen wir unseren Sicherheitsbestand.

Den Wechsel unserer Produkte von der alten MDD- zur neuen MDR-Norm verfolgen wir genau. Zusammen mit den Herstellern haben wir die Situation in Bezug auf den CH REP proaktiv geklärt und für einige die Rolle des Schweizer Bevollmächtigten übernommen.


Sie sehen: Wir tun **alles**, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Severin Augstburger  
Geschäftsführer

ANÄSTHESIE

INTENSIV-  
PFLEGE

DIALYSE

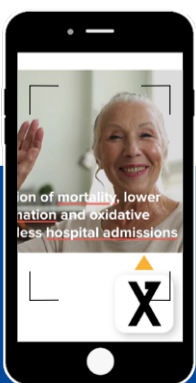

### Jetzt NEU:

Zum Scannen mit der AR-App für das digitale Erlebnis!



**AR View** – Xtend-App aus App-Store in 1 min. auf Handy oder Tablet herunterladen. Geöffnete App mit der kleinen Kamera über das Bild halten bis der Film startet. Das Video wie schwebend über der Zeitung anschauen.

**theramed ag**  
medizinprodukte

| einfach sicher.

2 Medtronic DAR-Filter und HME  
2 TESTAKTION:  
DAR-Beatmungsfilter / HME

3 Saures Hämodialyse-  
konzentrat

3 RESPOWER –  
Neuromuskulärer  
Beatmungsstimulator

# MEDTRONIC DAR-FILTER UND HME – DER RICHTIGE FILTER FÜR JEDE BEATMUNGSSITUATION

INTENSIV-  
PFLEGE

ANÄSTHESIE

## Filtrierung der Atemgase


Das Filtrieren spielt eine grosse Rolle, wenn es darum geht, das Risiko von Kreuzinfektionen zu senken, und die Atemwege der Patienten sowie der Mitarbeitenden während der Beatmung in der Narkose und auf der Intensivstation zu schützen.

Die Medtronic DAR-Atemfilter können eine mechanische oder eine elektrostatische Filtermembran enthalten. Beide Filtermedien bieten nachweislich einen wirksamen Schutz vor Kreuzkontaminationen.

## Klimatisierung der Atemgase

Die Intubation umgeht die oberen Atemwege und verhindert damit, dass diese die eingeatmete Luft erwärmen und befeuchten können. Innerhalb von zehn Minuten erhöhen sich Schleimviskosität und Wärmeverlust. Ernsthaftere Komplikationen können auftreten, wenn der Patient für längere Zeit intubiert bleibt.

Passive Wärme- und Feuchtigkeitsaustauscher (HME = Heat and Moisture Exchangers) simulieren die natürliche Befeuchtung des oberen Atemwegs, indem sie die Wärme und Feuchtigkeit auffangen, die der Patient ausatmet. Wenn der Patient einatmet, wärmt und befeuchtet die im HME aufgefangene Wärme und Feuchtigkeit die eingeatmete Luft.

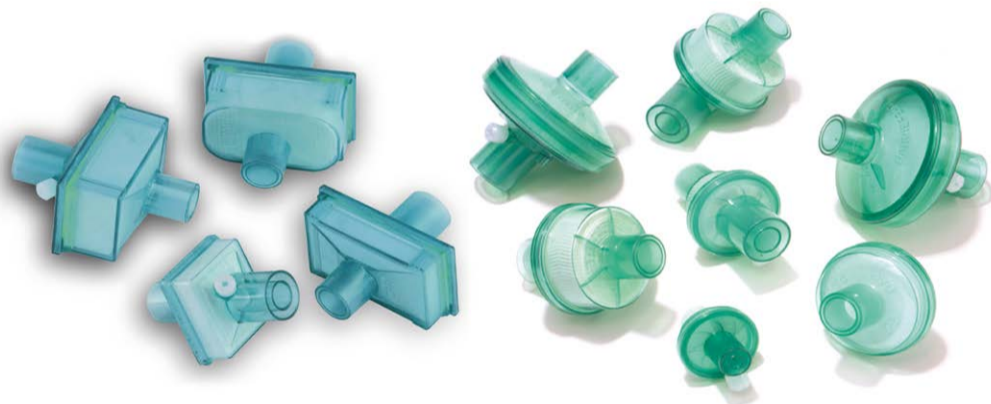

## Auswahl an Filtern

Je nach Beatmungssituation wählen Sie aus dem breiten Sortiment von Medtronic den passenden DAR-Filter:

Typ	MODELL	ERWACHSENE	KINDER	KLEINKINDER	TRACHEOTOMIERTE	GERÄTESEITE	KLIMATISIERUNG	WINKELKONNEKTOR
Mechanisch	DAR 351/5979	✓						
	DAR 351/5834					✓		
	DAR 351/5410					✓		
	DAR 354/5876	✓					✓	
	DAR 350/5879	✓						
Elektrostatisch	DAR 350S19006	✓						✓
	DAR 350/5422					✓		
	DAR 352/5877	✓					✓	
	DAR 352/5996	✓					✓	✓
	DAR 355/5430		✓				✓	
	DAR 355/5427			✓			✓	
	DAR 352/5805	✓					✓	
	DAR 353/19004	✓			✓		✓	

Wir beraten Sie gerne bei der Wahl des richtigen Beatmungsfilters/HME.

Sehen Sie die detaillierte Tabelle mit  
Abbildungen auf unserer Website.

> <https://www.theramed.ch/news/intensivpflege.html>

## WUSSTEN SIE, DASS THERAMED FÜR AUSGESPROCHENE BESTÄNDIGKEIT STEHT?

- Seit 38 Jahren erfolgreich auf dem Markt
- Seit 15 Jahren der gleiche Geschäftsleiter
- 14 Jahre dauert die Zusammenarbeit mit den Top-Lieferanten (80 % Umsatzanteil) im Schnitt
- 11 Jahre durchschnittliche Beschäftigungsdauer der Mitarbeitenden
- Zahlreiche jahrzehntelange Kundenbeziehungen

Auf Theramed können Sie sich verlassen.

## TESTAKTION DAR-BEATMUNGS- FILTER / HME

Bis zum 31.8.2022

**kostenlos 100 Stück**

DAR-Beatmungsfiler/HME nach Wahl



# SAURES HÄMODIALYSEKONZENTRAT

Unser Lieferant für das saure Hämodialysekonzentrat ist die deutsche Firma MTN Neubrandenburg GmbH, mit der wir seit mehreren Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Inzwischen gehört MTN zur Nipro-Gruppe, einem der weltweit grössten Anbieter an Produkten für die Dialyse.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Produkt aus einer breiten Palette an sauren Konzentraten mit Essig- oder Citronensäure (Citrasate) als säurendem Wirkstoff.

## Citrasate bietet Vorteile

- Ersetzt oder verringert den Heparinbedarf
- Verbessert die Dialyседosis Kt/V
- Korrigiert Acidose
- Verringert Post-Dialyse-Blutungen
- Verringert dialysebedingte Entzündungen

## Politainer – praktisch und ökologisches

Nebst den herkömmlichen Kanistern aus PE sind die Konzentrate auch im faltbaren Politainer erhältlich:

- Wiegt lediglich 50 % eines Standardkanisters (umweltfreundlicher)
- Lässt sich nach Gebrauch platzsparend zwischenlagern
- Wird effizient und ökologisch auf Paletten zu 120 anstelle 90 Kanistern geliefert und transportoptimiert zur Rezyklierung zurückgenommen.

## Additive

Wir führen auch Additive in Pulverform im Sortiment, um in bestehenden Säurekonzentraten den Kaliumwert anzuheben.

## Versorgungssicherheit und Logistik

Für unsere Kunden halten wir in der Schweiz ein Lager mit einer Reichweite von mindestens zwei Monaten. Zusammen mit unseren Logistikpartnern können wir die individuell gewünschten Anforderungen an die Lieferung erfüllen: Lieferrhythmus, Einbringung und Rücknahme des Leerguts.



DIALYSE

# RESPOWER – NEUROMUSKULÄRER BEATMUNGSSTIMULATOR

## Physiologische pulmonale Rehabilitation

Die nichtinvasive in- und expiratorische neuromuskuläre Stimulation der Atemmuskulatur ermöglicht eine physiologische pulmonale Rehabilitation. Bei COPD-Patienten können so die Ausdauer und Stärke des Diaphragmas und der abdominalen Muskeln, die pulmonale Ventilation, die Blutgase sowie die Gehdistanz und damit die Lebensqualität verbessert werden.

## Unterstützung bei Muskelschwäche

Respower verspricht unter anderem auch Unterstützung bei Muskelschwäche respektive deren Vermeidung während der mechanischen Beatmung, Lungenkrebs, Asthma, pulmonal-arterieller Hypertonie sowie Thorax- und Abdominalchirurgie. Bei Post-COVID-19-Patienten hilft die Technologie insbesondere bei der Sekretmobilisierung.

INTENSIV-  
PFLEGE

# UNSER DANK GILT UNSEREN KUNDEN

Wir danken unseren treuen und neuen Kunden für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen und nehmen dies als Ansporn, weiterhin das Beste zu geben. Hier eine Auswahl an Projekten, die wir aktuell realisieren dürfen:

- Auftrag des Inselspitals Bern für die Lieferung von **20'000** Dialysatoren Nipro Elisio über 2 Jahre.
- Das Schweizer Paraplegikerzentrum Nottwil arbeitet mit **1** neuen neuromuskulären Beatmungsstimulator ResPower.
- Ausstattung der Dialyse und Nephrologie Limmat AG in Schlieren mit **8** Dialysemaschinen Nikkiso DBB-EXA.
- Bestellung von **3** neuen Kopfhautkühlern Paxman durch das Brustzentrum Ostschweiz in St. Gallen.
- Das Zuger Kantonsspital bezieht jährlich **6'000** Politainer Dialysesäurekonzentrat Citrasate.
- Das Kantonsspital Graubünden investiert in **2** Kopfhautkühler Paxman.
- Das Spital Herisau erneuert seinen Gerätepark mit **10** Dialysemaschinen Nikkiso DBB-EXA.
- Bestellung von **2** Kopfhautkühlern Paxman durch das St. Claraspitals Basel.

## AGENDA

Seit Jahren unterstützen wir die Kongresse und Jahrestagungen unserer Kunden. Nutzen Sie an folgenden Veranstaltungen die Gelegenheit, unser Sortiment kennenzulernen und lassen Sie sich von den neusten Entwicklungen begeistern:

14.–16. September 2022  
**JAHRESTAGUNG SGI, BASEL**  
www.sgi-ssmi.ch

03.–04. November 2022  
**SWISSANAESTHESIA, INTERLAKEN**  
www.ssapm.ch

25.–27. Oktober 2022  
**IFAS FACHMESSE FÜR DEN GESUNDHEITSMARKT, ZÜRICH**  
www.ifas-messe.ch

08.–09. Dezember 2022  
**JAHRESTAGUNG SGN, INTERLAKEN**  
www.swissnephrology.ch

# UNSER BERATUNGS- UND VERKAUFSTEAM IST FÜR SIE DA

Haben Sie Fragen? Wünschen Sie ein persönliches Beratungsgespräch? Oder haben Sie Bedarf an einer individuellen Lösung? Mit Leidenschaft und Engagement sind unsere kompetenten Fachspezialisten für Sie da. Sie sind erreichbar unter der Nummer 041 228 20 20.



**Paula Accardi**  
Gebietsverantwortliche  
Deutschschweiz und Tessin



**Josué Grisel**  
Verkaufsberater Romandie




**Frédéric Ley**  
Verkaufsberater /  
Servicetechniker Romandie



**Pascal Marmier**  
Gebietsverantwortlicher  
Romandie



**Michael Zwick**  
Pflegefachmann Anästhesie /  
Intensivmedizin, Gebietsver-  
antwortlicher Deutschschweiz

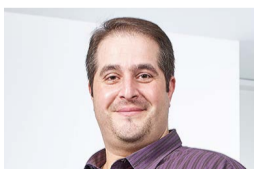

**Carmine Guglielmo**  
Sachbearbeiter  
Verkaufsinendienst



**Nicole Küng**  
Sachbearbeiterin  
Verkaufsinendienst



**Simone Sigrist**  
Sachbearbeiterin  
Verkaufsinendienst

# INNOVATIVE PRODUKTE UND KOMPETENTE DIENSTLEISTUNGEN

Das theramed-Sortiment und die Lieferantenpartnerschaften in der Übersicht:

SORTIMENT	HERSTELLER
<b>Respiratoren</b>	
Intensivrespiratoren für invasive Beatmung, NIV, Transporte und MRI	imt medical
<b>Atemtherapie</b>	
Atemgasbefeuchter	WILAméd / Fisher & Paykel
Highflow O2-Therapie	DEHAS
Ultraschallvernebler	SYST'AM
<b>Beatmungszubehör</b>	
Beatmungsfiler / HME	DAR – Medtronic
Beatmungsschlauchsysteme	DAR – Medtronic
Beatmungszubehör	DAR – Medtronic
Laryngoskope	Heine / Proact
<b>Monitoring</b>	
Automatische Blutdruckmessgeräte	BLT
Nervenstimulatoren / Relaxometer	IDMED
BIS-Sensoren	Medlinket
<b>Infusionsmanagement</b>	
Elektronische und elastomere PCA-Pumpen	Woo Young / Cane
Infusionszubehör	Convatec / Effe Emme
<b>Temperaturmanagement</b>	
Patientenwärmung	Warmtouch – Medtronic / Sterisets / Celsius
Blut- und Infusionswärmer	Biegler
Plasma-Auftaegeräte und Wärmeschubladen	EIC
Kopfhautkühlgerät	Paxman
<b>Hämodialyse</b>	
Dialysegeräte	Nikkiso
VND-Alarmgerät	Redsense
Dialysefilter	Serumwerk / Nipro
Bicarbonatkartuschen	Serumwerk
Blutschlauchsysteme	Nikkiso / Effe Emme
Gefässzugang	Nipro